

# FICHA TÉCNICA

## **NOMBRE DEL PRODUCTO**

NEX CLOREX C2

(Cepillo/ Esponja CHG 4%)

## **DESCRIPCIÓN**

NEX CLOREX C2 Cepillo/Esponja CHG 4%, es un cepillo-esponja de limpieza quirúrgico, de un solo uso, con limpia uñas; impregnado con aproximadamente 20 mL de solución antiséptica de limpieza (Digluconato de Clorhexidina).

## **PRESENTACION**

Caja de cartón tipo dispensador conteniendo 40 blísteres de polietileno de alta densidad. Cada blíster contiene una unidad

Envase primario: blíster individual conteniendo un cepillo-esponja y un limpia-uñas.

Envase secundario: caja dispensadora de cartón conteniendo 40 blísteres de polietileno de alta densidad.

Embalaje: caja exterior corrugada para 06 cajas dispensadoras.

## **PRODUCTO**

### **Empaque**

- Fácil de abrir.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Libre de rebabas, manchas y partículas extrañas.
- Rotulado conforme a las especificaciones nacional e internacional.

### **Características generales**

- Forma ergonómica que permite un agarre perfecto.
- Alta flexibilidad del cepillo para fregar y asegurar una limpieza precisa de manos.
- Cerdas suaves que no dañan la piel.
- Color del líquido: rosado
- No reutilizable.
- Libre de látex.
- Libre de partículas extrañas, rebabas o aristas cortantes.
- Dimensiones Totales:

| Ancho | Largo | Altura |
|-------|-------|--------|
| 45mm  | 90 mm | 35 mm  |

- Peso: 38 g
- pH del líquido: 5.0 a 8.0
- Titulación: 3.8 a 4.2  
Res. Sol. a 105°C: Min 6.5; Max 8
- Densidad: 1000 a 1050 g/L
- Condición biológica: No tóxico, no irritante, Hipoalergénico. No estéril.

- Condición Sanitaria: Acorde a las normas internacionales de calidad.
- Acción antiséptica de amplio espectro contra bacterias Gram + y Gram -.

## **COMPOSICIÓN**

100g contiene:

- Digluconato de clorhexidina (CHG) 4,00 g
- Agua purificada y excipientes c.s.p. 100,00 g

## **ALMACENAMIENTO**

Mantener los recipientes cerrados antes de la utilización. Mantenga el producto en un lugar frío, lejos de la luz solar directa.

## **APLICACIONES**

Lavado prequirúrgico de la piel.

## **MODO DE USO**

- Mojarse las manos y antebrazos con agua.
- Limpie debajo de las uñas con limpiador de uñas.
- Restregar durante al menos 3 minutos, prestando especial atención a las uñas, las cutículas y los espacios interdigitales.
- Enjuague y repita el restregado.
- Deseche el cepillo / esponja.
- Enjuagar bien las manos y los antebrazos y seque con un paño estéril.

## **INCOMPATIBILADES CON OTROS**

### **PRODUCTOS**

Clorhexidina es incompatible con el jabón y con otros agentes aniónicos.

## **ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE SEGURIDAD**

- No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado. No mezclar con otros productos.
- Evítese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico, y muéstrela la etiqueta o el envase. Al fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.


## **CADUCIDAD**

36 meses

# FICHA TÉCNICA


## ESQUEMA Y MATERIALES

### Cepillo/ Esponja

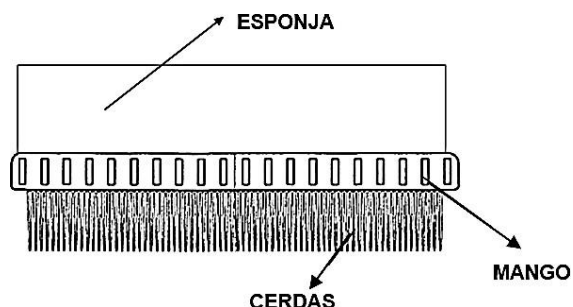

- **Esponja:** material de poliuretano de grado médico. Es un sistema de soporte para soluciones antisépticas. Permite enjabonar la punta de los dedos, manos y brazos mientras se aplica el antiséptico
- **Mango y cerdas:** Polietileno de grado médico. Brinda agarre para manejar el cepillo durante el procedimiento de lavado. Garantiza un procedimiento de fregado efectivo de manos y brazos.

### Limpia uñas

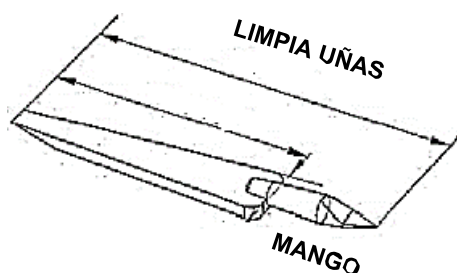

- **Limpia-uñas:** material de polipropileno.

## NORMAS QUE APLICA

EN 1040  
EN 12054  
EN 12791  
EN 1650  
ISO 10993-7  
ISO 13485  
ISO 9001

## FABRICANTE

NEX MEDICAL ANTISEPTICS S.R.L.  
Via per Arluno, 37 - 20010 Casorezzo (MI) – Italia.

**NEX**  
MEDICAL  
ANTISEPTICS

## IMAGEN DEL PRODUCTO

Envase mediano, inmediato y accesorio

