

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD PARA
DESECHOS PUNZOCORTANTES DE 7.0 L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

1033

DESCRIPCIÓN

Recolector para desechos punzocortantes, manufacturado en polipropileno de alta densidad para garantizar el desecho seguro; libre de punciones accidentales.

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma rectangular con base y tapa rectangular. Suave al tacto, libre de materiales extraños y de rebabas cortantes

Tapa

- Base de la tapa de forma rectangular. Consta de dos piezas ajustables a presión. Hermética y con altura abovedada. Provista de una abertura circular en el centro con pestañas unidireccionales y sistema de embudo en una sola vía. Cierre temporal y final. Cuenta con un sistema de desarmador para agujas con rosca luer lock. Color transparente.

Cuerpo del contenedor

- Cuerpo del recipiente de forma trapezoidal y base rectangular.
- Elaborado con plástico rígido y paredes gruesas.
- Asas laterales
- Color rojo translúcido (acorde al código de colores estandarizado), que permite visualizar el interior a una altura de $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen.
- Resistente a ruptura y perforación por elementos punzocortante, superior a 15 Newton
- Etiquetas en ambas caras, con logotipo de material biológico, adheridas según reglamentación internacional, colores llamativos para facilitar a los usuarios la identificación de riesgo, con el objetivo de tener mayor control y seguridad; además, tiene una línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.

- Producto diseñado para un solo uso, esterilizable e incinerable. Al incinerarse no emite partículas de PVC.
- Contenedor puede ser usado sobre una superficie o mesa. Pero si se requiere, también puede colocarse adosado a la pared, teniendo para ello un soporte metálico como accesorio.

MATERIAL

- Polipropileno de alta densidad
- Libre de P.V.C.
- Libre de cloro

CAPACIDAD

- 7.0 L

DIMENSIONES:

Tapa pequeña (circular)	(110 x 110) mm
Tapa grande (tipo bóveda)	(260 x 175 x 94) mm
Acceso del contenedor	(240 x 155) mm
Base	(220 x 135) mm
Altura sin tapa	225 mm
Altura con tapa	320 mm

INSTRUCCIONES DE USO

1. **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee la base de la tapa con la tapa circular de cierre. Presione la tapa circular firmemente sobre la base hasta que todos los broches queden fijos. Alinee la base de la tapa ya armada, con el cuerpo del contenedor y presione nuevamente, hasta que todos los broches queden igualmente fijos.
2. **Para usarlo:** No fuerce los objetos punzocortantes dentro del contenedor. Revise el nivel de llenado continuamente.
3. **Cierre permanente:** Cuando se llene, presione firmemente la tapa circular con ambas manos hasta que se cierre completamente.
4. **Para transportarlo:** Tome el contenedor por las asas del cuerpo del contenedor. Nunca por las que están en la tapa o desde el cuerpo del contenedor.
5. **Desecho:** según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar

ADVERTENCIAS

1. Manipular con precaución
2. Llenar hasta el nivel indicado
3. Cerrar herméticamente
4. **Tiempo máximo de uso una vez instalado:** 04 semanas

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Almacenar en un lugar cerrado y seco.
2. Mantener a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja de cartón corrugado x 40 unidades

NORMAS QUE APLICA

- BS EN ISO 23907:2012.

FABRICANTE


PlastiOnce sas.
Colombia



PlastiOnce
Inyección y Soplado

IMAGEN



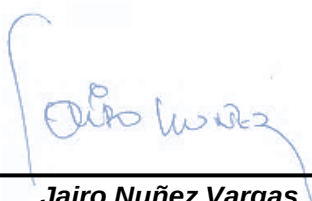

Jairo Nuñez Vargas
Jefe de Control de Calidad



PlastiOnce
Nit: 805.014.438-3