

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

DISPOSABLE LARYNGOSCOPE BLADE
(Hoja de laringoscopio desechable)

DESCRIPCIÓN

El Disposable laryngoscope blade (Hoja de Laringoscopio desechable) está diseñado para usarse con el videolaringoscopio. Disponible en varias presentaciones conforme a las necesidades del paciente (infante, niño, adulto, pacientes con dificultades respiratorias y obesas). Fabricado con Policarbonato.

INDICACIONES

Junto al videolaringoscopio, se usa para que el personal médico levante la epiglotis de un paciente y exponga la glotis para intubar la traqueal de manera precisa e incorporar fácilmente la anestesia o brindar los primeros auxilios. Asimismo, se puede usar para realizar exámenes y tratamientos al interior de la cavidad oral.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón grado médico conteniendo 12 sobres. Cada sobre de papel grado médico y polietileno conteniendo una unidad


- **Empaque primario:** sobre de papel grado médico y polietileno conteniendo una unidad.
- **Empaque secundario:** caja de cartón grado médico conteniendo 12 sobres individuales.
- **Embalaje:** caja de cartón corrugado conteniendo 10 cajas de cartón grado médico.

CARACTERÍSTICAS

- Hojas de laringoscopio compatibles con el videolaringoscopio MEDCAPTAIN, para ajustarse a los requerimientos de los diferentes grupos de pacientes.
- Elaborado con Policarbonato (PC) de alta calidad (polímero o resina sintética de grado médico).
- Color transparente de alta intensidad, que proporciona un efecto visual claro y adopta un diseño compacto.
- Biocompatible
- Los agentes antivaho (anti empañamiento) son compatibles sin necesidad de calentar el recubrimiento de la hoja del laringoscopio.
- Libre de Ftalatos (DEHP)
- Producto de un solo uso
- Esterilizado con ETO

COMPOSICIÓN Y ESQUEMA

Consta del sujetador o conector, tubo de sujeción y el depresor de lengua.

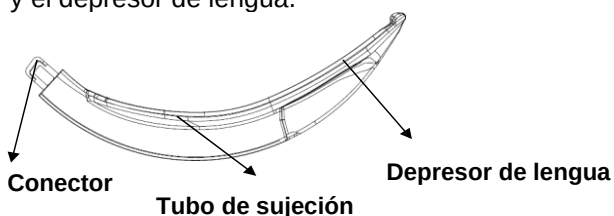

MODELOS:

Modelo	Descripción	Dimensiones			Peso
		Largo	Ancho	Alto	
M1	Hoja de laringoscopio # 1	106±5mm	18±3mm	30±3mm	3.5–10 kg
M2	Hoja de laringoscopio # 2	115±5mm	22±3mm	33±3mm	>10–40 kg
M3	Hoja de laringoscopio # 3	126±5mm	27±3mm	38±3mm	>40–70 kg
M4	Hoja de laringoscopio # 4	140±5mm	29±3mm	41±3mm	>70 kg
M3D	Hoja de laringoscopio # 3D dedicada para adultos con vía aérea difícil	126±5mm	24±3mm	42±3mm	>40–70 kg

PRECAUCIONES

- Debe ser usado por o bajo la guía de personal médico clínicamente capacitado y calificado en el uso de este producto.
- Si el producto o el paciente no se ajustan a las condiciones normales para su uso, evite hacerlo y tome las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del paciente.
- Durante el uso del producto, si es difícil terminar la intubación o se produce una dificultad, detenga la operación de intubación inmediatamente.
- No usar el producto si el empaque está dañado.
- Antes de usar el producto, verifique la fecha de caducidad en la etiqueta del empaque. No use el producto si está vencido.
- Este producto pertenece a un producto estéril para un solo uso. NO REUTILIZAR.
- Antes de usarse en conjunto con el videolaringoscopio, lea detenidamente el manual de operación de este último.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

1. Revise la etiqueta del empaque para verificar que el producto no haya caducado.
2. Compruebe que el empaque esté intacto; caso contrario, utilice otro producto.
3. Abra el empaque hasta 1/3 del total y sujete el conector de la hoja del laringoscopio y tire fuera de la bolsa.
4. Verifique que la superficie de la hoja del laringoscopio esté lisa, sin bordes afilados, rebabas o protuberancias. Si se encontrase alguna de estas características no esperadas, reemplace el producto para evitar daños al paciente.
5. Inserte el conector de la hoja del laringoscopio en el mango del videolaringoscopio a través del tubo de fijación y empuje la hoja. Después de escuchar un clic, la instalación es exitosa.
6. Verifique que la conexión entre el videolaringoscopio y la hoja del laringoscopio sea constante. Si la conexión se afloja,

FICHA TÉCNICA

reinstale la hoja del laringoscopio de acuerdo con el paso 5 para evitar accidentes durante el uso.

7. Encienda el video laringoscopio y realice la intubación traqueal.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto a temperatura ambiente, alejado de altas temperaturas, humedad, luz solar directa y gases corrosivos durante el almacenamiento y el transporte.
Apilar hasta 05 niveles.

NORMAS QUE APLICA


ISO 13485, ISO11135-1, EN ISO 14971

FABRICANTE

MEDCAPTAIN LIFE SCIENCE CO., LTD.

麦科田
MEDCAPTAIN

IMAGEN DE TAMAÑOS Y USOS

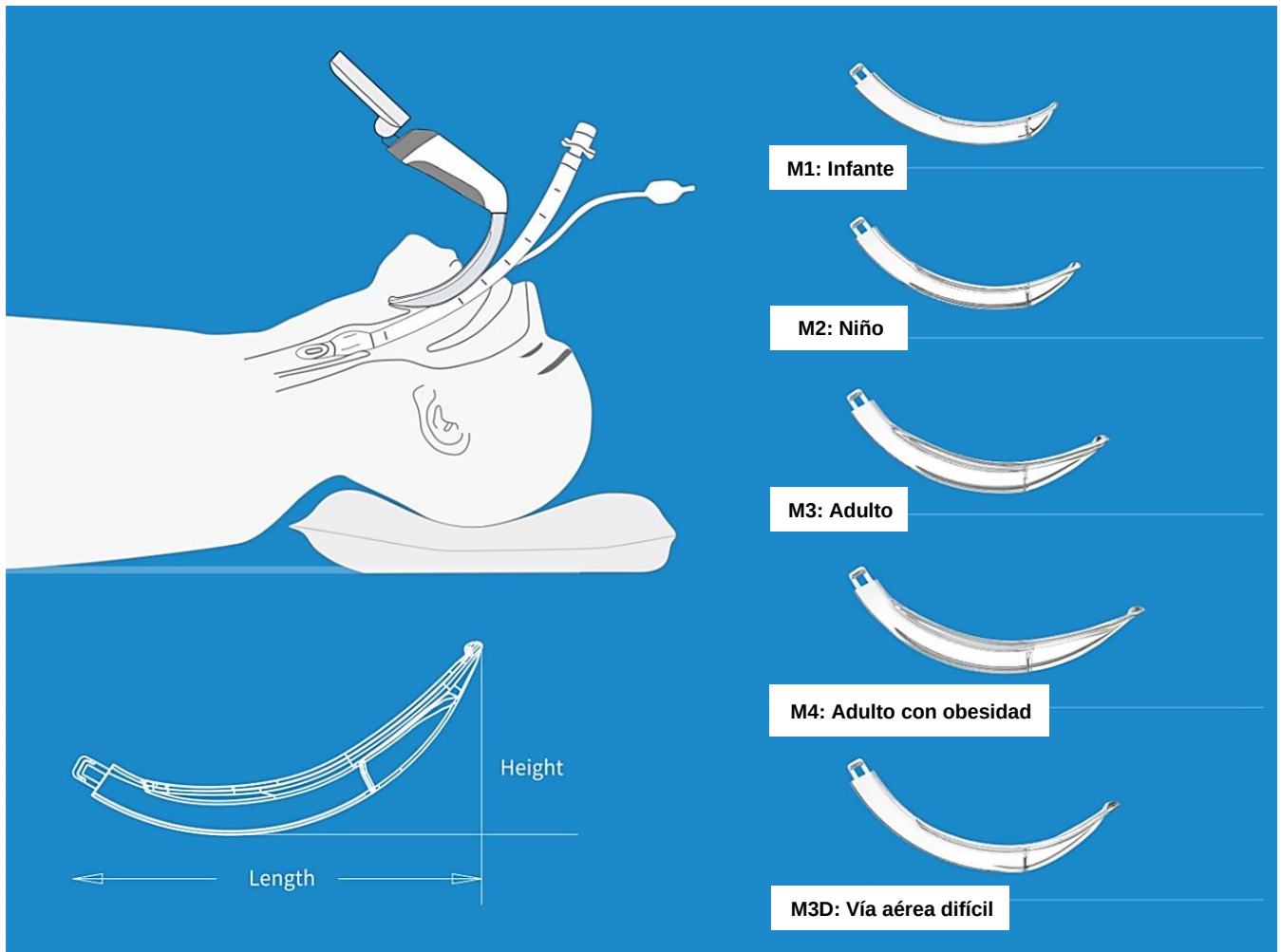

FICHA TÉCNICA

IMAGEN DE LA PRESENTACIÓN

