

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

TROCARES DESECHABLES

MARCA

GEYI

MODELO DE REFERENCIA

Tipo III: GYTR-III (Punta de seguridad con hoja blindada)

DESCRIPCIÓN

Dispositivo Médico diseñado para crear un canal de trabajo del medio interno, para ingreso de instrumentos quirúrgicos de 5 mm a 15 mm de diámetro.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón conteniendo un blíster pre formado en cuyo interior se encuentra el trocar

▪ **Envase primario:**

- Blíster pre formado de plástico PET y papel Tyvek conteniendo un trocar desmontado en dos partes.
- Herméticamente sellado, que garantizan las propiedades físicas, esterilidad e integridad del dispositivo
- Facilidad de apertura (peel open)
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Libre de partículas extrañas, rebabas o aristas cortantes.
- Rotulado conforme a las especificaciones nacional e internacional

▪ **Envase secundario:**

- Caja de cartón grado médico conteniendo un blíster.
- Diseñado para garantizar las propiedades físicas e integridad del blíster que alija al dispositivo
- Libre de partículas extrañas, rebabas o aristas cortantes.
- Rotulado conforme a las especificaciones nacional e internacional

▪ **Embalaje:**

- Caja de cartón corrugado conteniendo 20 cajas de cartón grado médico.
- Dimensiones homogéneas para facilitar su apilamiento.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento; para mantener la integridad del producto.
- Libre de partículas extrañas, rebabas o aristas cortantes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Acabado libre de partículas, rebabas y aristas cortantes
- Condición biológica: Estéril, hipoalergénico, atóxico, apirógeno y biocompatible.
- Indicador de viraje químico: que garantiza la esterilidad por ETO (Red → Blue)

- Condición sanitaria acorde a las normas internacionales de calidad.
- Libre de látex
- Libre de DEHP
- Trocar con diseño ergonómico
- Diseño que permite trabajar con un eje giratorio de 360°.
- Desmontado en dos partes: Punzón y cánula
 - **Punzón u obturador**
 - Punzón retráctil con sistema de seguridad
 - Superficie lisa sin irregularidades, rugosidades o bordes que generen fricción con los tejidos o comprometan la inserción.
 - Cabezal del punzón diseñado ergonómicamente
 - Cuchilla metálica con punta en "V", cuya longitud es de 8 mm en la base y lados.
 - Sistema de corte en todo su trayecto para minimizar la incisión.
 - Punta del punzón en forma roma para evitar heridas.
 - Barra de Conexión tipo III con diámetro uniforme en toda su longitud.
 - Indicador de tamaño en el botón tipo sombrero para mejor identificación.
 - **Cánula con llave de paso**
 - Cabeza del trocar desmontable (para diámetros de 10 mm en adelante).
 - Tapa de ajuste con empaquetadura de silicona al ras del cabezal desmontado.
 - Llave de paso para CO₂ tipo Luer Lock
 - Reductor universal para adaptación de todo diámetro de instrumento laparoscópico.
 - Válvula de seguridad interna para evitar la fuga de gas.
 - Indicador de diámetro de inserción en la cabeza de la cánula, que estipula el espesor de instrumento a insertarse.
 - Color negro transparente que permite verificar inmediatamente obstrucciones o impedimentos en el interior de la misma.
 - Ranura tipo rosca en toda la superficie externa, que configura un sistema de fijación en la cavidad abdominal y evitar la movilidad del mismo.
 - Biselado en la parte distal de la cánula

DIMENSIONES

TROCAR	OBTURADOR	CÁNULA		
		Diámetro		Longitud
Diámetro (Ø)	Dilatación de la punta	Interno	Externo	
3mm	3.5mm	3.8mm	6mm	65 mm
5mm	5.8mm	6mm	8mm	100 mm
10mm	10.8mm	11mm	13mm	110 mm
12mm	12.8mm	13mm	15mm	110 mm
15mm	15.8mm	16mm	18mm	110 mm

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN O MATERIALES

PARTES	COMPONENTES	MATERIAL
CÁNULA Y LLAVE DE PASO	Cánula	PC: Policarbonato
	Base de la Cánula	ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno
	Tapa de ajuste	ABS
	Válvula de llenado O llave de paso	PC
PUNZÓN U OBTURADOR	Cuchilla	Acero inoxidable (Al) 304
	Aguja de punción	ABS
	Barra de conexión tipo III	ABS
	Casquete tipo alfiler	PC

FRECUENCIA DE CAMBIO

- Un solo uso. Desechable

ALMACENAMIENTO

- Almacenar a temperatura ambiente y en lugar limpio y seco.

CADUCIDAD

- 3 años

NORMAS QUE APLICA

ISO 13485, CE, ISO 11135, ISO 13402, ISO 10993-5, ISO 10993-10

FABRICANTE:

Zhejiang Geyi Medical Instrument Co., Ltd.
China



INDICACIÓN DE USO

Se utiliza principalmente para el transporte de gas CO₂ para la cavidad abdominal en cirugía laparoscópica, y el establecer un acceso entre el endoscopio y los instrumentos quirúrgicos cuando los dos entran y salen de la cavidad abdominal.

IMAGEN:



FICHA TÉCNICA




**Cánula
desmontable**



**Tapa de ajuste con reductor
universal y base de la cabeza
de la cánula**



**Tapa de ajuste con
empaquetadura de silicona y
base de la cánula**

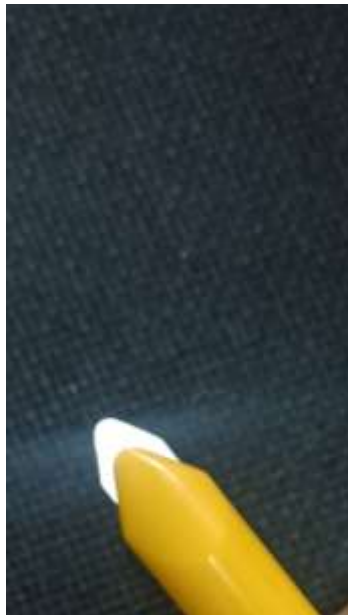

**Cuchilla metálica con
punta en "V"**